

eyetuitive
monteringssett
Brukermanual

NB 2-3

eyetuitive

NO Brukermanual

Kjære kunde, takk for at du har kjøpt det øyetuitive monteringssettet! Vennligst les denne brukermanualen nøye og kontakt oss ved behov.

Tiltent bruk og beskrivelse

Dette monteringssettet er utviklet for å montere øyetuitive øyestyriingsenhet på et bestemt nettbrett. Det inneholder et etui, gjennomsiktlige holdere, en HUB med strømadapter og USB-kabler, og to forskjellige monteringsplater (VESA eller UDS). Med den medfølgende strømadapteren kan du lade nettbrettet mens du bruker øyetuitive. Hvilket nettbrett som er kompatibelt, er spesifisert på emballasjen til dette produktet.

Ta kontakt med

GazeFirst GmbH
Große Rittergasse 18
60594 Frankfurt am Main
Tyskland

Hvis du trenger mer informasjon eller support, kan du besøke <https://gazefirst.com> eller <https://eyetuitive.com>. Se også etter oppdaterte versjoner av dette dokumentet.

Juridisk

øyetuitive monteringssett Brukermanual v1.1, juni 2025.

© GazeFirst GmbH, alle rettigheter forbeholdt. øyetuitive og GazeFirst er varemerker som tilhører GazeFirst GmbH.

Alle andre produkter det henvises til, kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.

GazeFirst GmbH har gjort sitt ytterste for å sikre at informasjonen i denne manualen er nøyaktig og pålitelig. Informasjonen gis imidlertid "som den er" uten noen form for garanti. GazeFirst GmbH påtar seg ikke noe ansvar for nøyaktigheten, innholdet, fullstendigheten, lovligheten eller påliteligheten av informasjonen i denne manualen. Det gis ingen garantier, løfter og/eller representasjoner av noe slag, uttrykt eller underforstått, med hensyn til arten, standarden, nøyaktigheten eller annet av informasjonen som gis i denne manualen, og heller ikke med hensyn til om informasjonen er egnet for dine spesielle omstendigheter.

GazeFirst GmbH forbeholder seg retten til når som helst og uten varsel å foreta endringer eller forbedringer av produktene som er beskrevet i denne manualen. Dette kan omfatte oppdateringer, modifikasjoner og endringer av enhetens funksjonalitet eller spesifikasjoner.

Sikkerhet

Vennligst les følgende sikkerhetsinformasjon nøye. Begrepet "enhet" refererer til den øyestyriingsenheten, strømadapteren og monteringssettet.

⚠ Barnesikkerhet / kvelningsfare

Enheten inneholder små deler som kan utgjøre en kvelningsfare for barn og spedbarn. Oppbevar enheten utilgjengelig for barn. Når apparatet brukes i nærheten av barn, må det alltid overvåkes av en voksen.

⚠ Varmeutvikling

Enheten genererer varme på grunn av høye ladestrømmer, noe som kan føre til at baksiden varmes opp til 40 °C (104 °F). Hvis enheten brukes i direkte sollys eller i miljøer med høye temperaturer utenfor de anbefalte temperaturgrensene, kan denne grensen overskrides. Unngå å berøre baksiden av enheten etter lengre tids bruk. Hvis enheten føles for varm, må du vente til den er avkjølt før du tar den i bruk.

⚠ Service og garanti

Brukeren kan ikke utføre service på enheten. Hvis du forsøker å åpne eller reparere enheten selv, oppheves garantien. Hvis det er behov for service på enheten, må du kontakte autoriserte forhandlere eller produsenten.

⚠ Forsiktig ved montering

Feil montering av enheten kan føre til at den løsner og potensielt forårsaker personskade. Sørg for at enheten monteres i henhold til produsentens anvisninger. GazeFirst GmbH er ikke ansvarlig for skader eller personskader som følger av feil montering. Montering av enheten i en hvilken som helst konfigurasjon skjer på brukerens egen risiko.

⚠ Miljø

Ikke la enheten ligge i varme omgivelser, for eksempel i en bil i sollys eller i nærheten av åpen ild. Ikke sett den i stekeovn, mikrobølgeovn eller andre apparater. Følg de angitte temperaturgrensene for lagring og bruk. Ikke bruk den i omgivelser med eksplosive eller brannfarlige gasser.

Installasjon

Kompatibilitet

Sjekk på pakken hvilket nettbrett som er kompatibel med dette monteringssettet, ettersom flere alternativer er tilgjengelige. Hvis du er i tvil, kan du kontakte leverandøren.


Følg instruksjonene nederst på pakken for å installere monteringssettet.

Etui til nettbrettet

Installer nettbrettet i det medfølgende gjennomsiktige nettbrett-etuiet før du klikker det fast i monteringssettet.

Strømadapter

eyetuitive kobles til en iPad eller et Windows-nettbrett via USB-C gjennom strømadapteren med de medfølgende kablene. I pakken finner du to 150 mm USB-C til USB-C-kabler for å gjøre dette. Den ene er utstyrt med en 180° vinkeladapter og kobles til nettbrettet og til strømadapteren ved punkt 1. Den andre kobler øyestylingen til strømadapteren ved punkt 3. Likestrømkontakten ved punkt 2 brukes til å forsyne øyestylingen med strøm og til å lade nettbrettet. Bruk alltid den medfølgende strømforsyningen, ikke andre modeller.

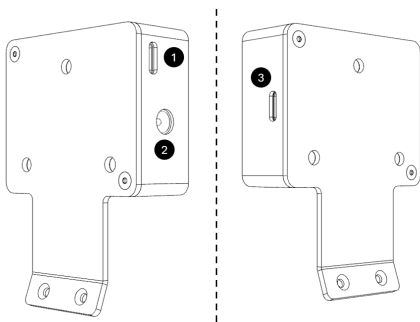

Generelle spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Navn	eyetuitive monteringssett
USB-tilkobling	USB 2.0 Type C
Spenning	5,0 V DC
Nettbrettport	5,0 V, 3,0 A USB PD
Port for øyesporing	5,0 V, 0,9 A
Likestrømkontakt	5,0 V LIKESTRØM, 4,0 A
Strømforbruk	Maksimalt 20,0 W

Temperaturverdier

Sørg for å følge disse temperaturrensene ved bruk og oppbevaring av strømadapteren og monteringssettet:

Oppbevaring:

Temperatur: -20 °C til +60 °C (-4 °F til 140 °F)

Luftfuktighet: 10 % til 90 % (ikke-kondenserende)

Bruk: Drift:

Temperatur: 0 °C til +35 °C (32 °F til 95 °F)

Luftfuktighet: 20 % til 80 % (ikke-kondenserende)

Selve enheten er ikke vanntett og bør ikke komme i kontakt med vann.

Rengjøring

Bruk en tørr, myk, lofri klut til å rengjøre monteringssettet. Unngå å bruke sterke alkohol- eller løsemiddelbaserte rengjøringsmidler.



Kassering

Som med alt annet elektronisk utstyr bør du aldri kaste det i husholdningsavfallet. Følg lokale forskrifter for avhending av elektronisk utstyr.



Erklæring om samsvar

eyetuitive monteringssett er CE-kompatibelt, noe som indikerer samsvar med de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene som er fastsatt i europeiske direktiver. eyetuitive monteringssett er i samsvar med følgende standarder og direktiver:

- EN 55032:2015 Elektromagnetisk kompatibilitet for multimedieutstyr - Emisjonskrav
- EN 55035:2017 Elektromagnetisk kompatibilitet for multimedieutstyr - Krav til immunitet
- RoHS2 (2011/65/EU)
- RoHS3 (2015/863/EU)
- EMC (2014/30/EU)
- FCC 47 CFR del 15
- ICES-003 utgave 6

