

DE/EN

**GEBRAUCHS-
ANWEISUNG**

**INSTRUCTIONS
FOR USE**

WheelChair-Link for AMAneo MX




C.S.S.
MICRO SYSTEMS

Mit dem **WheelChair-Link** können E-Rollstühle mit integriertem Bluetooth®-Interface für die Mausfunktion des Joysticks mit dem **AMAneo MX** verbunden werden, so dass der Rollstuhljoystick zur Steuerung von Gaming-Konsolen und ähnlichem genutzt werden können.

The **WheelChair-Link** allows electric wheelchairs with a built-in Bluetooth® interface to be connected to the **AMAneo MX** for the joystick's mouse function, enabling the wheelchair joystick to be used to control gaming consoles and similar devices.

Bedienelemente / Control elements

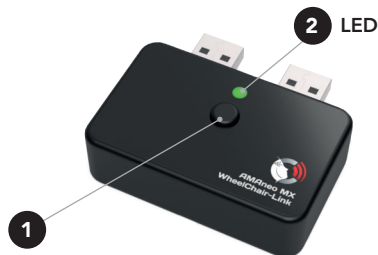

Koppeltaste / Pairing button

Inbetriebnahme / Bedienung

Voraussetzung: Firmware V1.3 **AMAneo MX**! Bitte ggfs. zuerst **AMAneo MX** updaten, siehe Gebrauchsanweisung.

Den **WheelChair-Link** in den **AMAneo MX** (beide USB-Buchsen) einstecken. Er meldet sich dann dort automatisch an.

Im Normalzustand sucht der **WheelChair-Link** nicht aktiv, sondern verbindet sich nur mit dem zuletzt bekannten Rollstuhl erneut. Zum Koppeln mit dem Rollstuhl die Koppeltaste **1** drücken. Dadurch wird die Suche nach einem Rollstuhl für ca. 30 Sekunden aktiviert, die LED **2** blinkt blau. Den Rollstuhl in den Pairing-Modus bringen (siehe Anleitung der Rollstuhlsteuerung).

Im Display von **AMAneo MX** erscheinen jetzt alle koppelbaren Rollstühle und andere Geräte in der Umgebung. Bitte mit den Tasten ▲ und ▼ den gewünschten Rollstuhl auswählen und mit ⏵ bestätigen. Sobald die Verbindung steht, wird die Suche automatisch beendet und das Gerät speichert dieses Eingabegerät für spätere Wiederverbindungen. Der Vorgang kann bis zu einer Minute dauern. Die LED **2** leuchtet blau. Ein weiterer kurzer Tastendruck beendet die Suche auch manuell wieder.

LED-Bedeutung:

- **Grün 3 s nach Start:** WheelChair-Link gestartet.
- **Blau dauernd:** Mit Rollstuhl verbunden.
- **Blau blinkend:** Pairing/Scan aktiv.
- **Rot blinkend 3 s:** Verbindung unerwartet getrennt.
- **Aus:** Keine Verbindung, kein Scan.

Funktion Taste ❶:

- **Kurz drücken:** Pairing/Scan starten, dann im **AMAneo MX**-Menü Rollstuhl auswählen.
- **Kurz erneut drücken:** Pairing/Scan stoppen.
- **Mind. 3 s drücken:** Bekannte Verbindungen löschen.

Hinweise:

- Es wird immer der zuletzt gekoppelte bzw. zuletzt bekannte Rollstuhl bevorzugt wiederverbunden.
- Wenn kein Rollstuhl verbunden ist, bleibt die LED ❷ aus.
- Nach Ablauf der Suchzeit schaltet die Suche automatisch wieder ab.

Setup / Use

Requirement: FW 1.3 **AMAneo MX**! If necessary, please update **AMAneo MX** first; see the Instructions for Use.

Plug the **WheelChair-Link** into the **AMAneo MX** (both USB ports). It will then automatically register there.

In normal mode, the **WheelChair-Link** does not actively search for a connection but only reconnects to the last known wheelchair. To pair with the wheelchair, press the pairing button ❶. This activates the search for a wheelchair for approx. 30 seconds; the LED ❷ flashes blue. Put the wheelchair into pairing mode (see the wheelchair controller's instructions).

The **AMAneo MX** display now shows all pairable wheelchairs and other devices in the environment. Please use the ▲ and ▼ buttons to select the desired wheelchair and press ⏻ to confirm. As soon as the connection is established, the search ends automatically and the device saves this input device for future reconnections. This process may take up to one minute. The LED ❷ lights up blue. Pressing the button briefly again manually ends the search.

LED Indications:

- **Green for 3 sec. after startup:** WheelChair-Link started.
- **Permanent blue:** Connected to wheelchair.
- **Flashing blue:** Pairing/scanning active.
- **Flashing red for 3 sec.:** Connection unexpectedly lost.
- **Off:** No connection, no scanning.

Button ❶ Function:

- **Press briefly:** Start pairing/scanning, then select the wheelchair in the **AMAneo MX** menu.
- **Press briefly again:** Stop pairing/scanning.
- **Press and hold for at least 3 seconds:** Delete current connections.

Notes:

- The system always prioritizes reconnecting to the most recently paired or most recently known wheelchair.
- If no wheelchair is connected, the LED ❷ is off.
- After the search time has elapsed, the search automatically turns off.

Technische Daten / Technical specifications

Stromversorgung / Power supply:

Über **AMAneo MX** / Via **AMAneo MX**

Kompatibilität / Compatibility:

Rollstühle mit Bluetooth® Classic-Unterstützung /
Wheelchairs with Bluetooth® Classic support

Voraussetzung / Requirement:

Firmware **AMAneo MX** V1.3 or higher

Montage / Installation:

Als Modul direkt auf die beiden USB-A-Buchsen des
AMAneo MX aufsteckbar / Plugs directly onto the two
USB-A ports of the **AMAneo MX** as a module

Maße / Dimensions: 59,5 × 48,5 × 17 mm

Gewicht / Weight: 31 g

WEEE DE94635635



Gebrauchsanweisung / Instructions for Use:

#20544 WheelChair-Link für AMAneo MX V1.0 DE/EN

Support: support@csslabs.de

© 2026 CSS MicroSystems GmbH



ASSISTIVE TOOLS FOR A BETTER LIFE

